


JVC

230万画素 24.1"カラー液晶モニター

CCL242

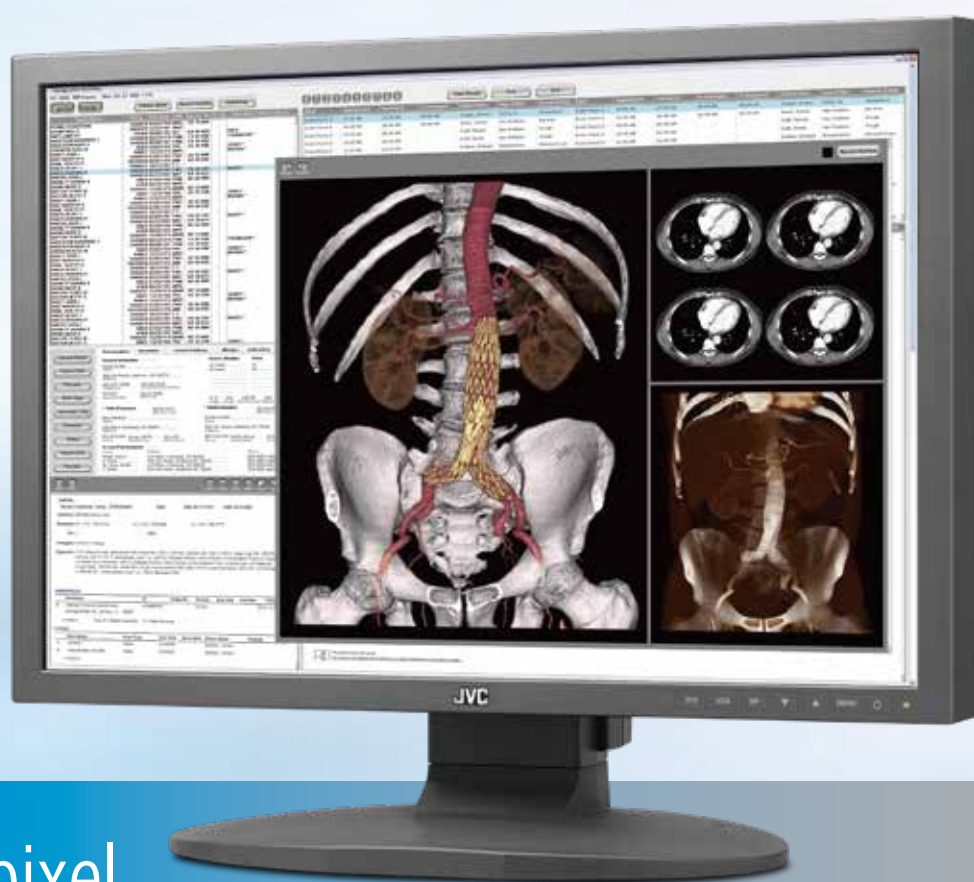

2.3

Megapixel
Color Monitor

キャリブレーション機能と高画質IPSパネル搭載
24.1型ワイド医用画像表示カラーモニター

24.1"

300
cd/m²

1000:1

10Bit
LUT

LED
バックライト

キャリブレーション

本体内蔵
電源

5年
保証

1920×1200ピクセルのワイド表示

多数のウィンドウを同時に参照する医用画像解析アプリケーションにも快適な作業エリアを提供します。視野角による輝度と色味の変化が少ない、高画質IPS方式の液晶パネルを搭載しています。


カラーキャリブレーション機能を搭載

ガンマ特性・色温度・輝度の調整を行い、オリジナルに忠実な色再現とDICOM GSDFに忠実で滑らかなグレースケール表示が可能です。

※オプションのキャリブレーションキットが必要です。

10 bit LUT (ルックアップテーブル) 搭載

グラフィックスカードから入力される8bit(256階調)データを、内蔵の10bit(1021階調)LUTが最適な階調データに変換。DICOM GSDF準拠の高精度な階調表示を実現しました。

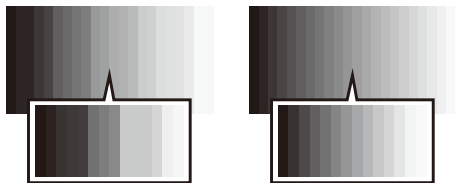

輝度安定化システム λ-Sentinel を搭載

起動時や環境温度、長年の使用による輝度の変動を自動的に補正し、常に安定した表示が可能です。

LED バックライトによる長寿命及び省エネルギー化

バックライトのLED化により従来のCCFL(冷陰極管)バックライトを搭載した製品に比べ、長寿命化及び消費電力低減を実現しました。

DisplayPort を含めた3系統入力に対応

アナログRGB(D-sub15ピン)、デジタルDVI(DVI-D)の他にDisplayPortを装備。

安心の5年保証


ご購入から5年間の長期無償保証をお付けしています。保証期間中に修理が発生した場合、お客様から故障機を送付いただくセンドバック方式で無償修理を行います。また、修理期間中は代替機を無償でご用意します。

※保証内容及び保証条件の詳細は、当社保証規定によります。

仕様

モデル名	CCL242	
方式	24.1型 TFTカラー IPS方式	
表示画面サイズ	水平518mm×垂直324mm	
液晶パネル	画素ピッチ	水平0.270mm×垂直0.270mm
	コントラスト比	1000:1 (typ.)
	最大輝度	300cd/m ² (typ.) 出荷設定150cd/m ²
	視野角	178°(上下・左右)
表示性能	推奨解像度	1920×1200
	表示色	1677万色 ※DisplayPort 10bit入力時は、10億7374万色
	階調表示	1021階調(10bit)表示
インターフェイス	入力信号	デジタル:DVI-D、DisplayPort アナログ:D-Sub15ピン
	プラグアンドプレイ	DDC2B 対応
電源	入力電源	AC100~240V、50/60Hz(AC電源本体内蔵)
	最大消費電力	60W(typ.)、(IPowerManagement機能付き)
機能	キャリブレーション	輝度、ガンマ、色度の調整 (オプションのキャリブレーションキットが必要)
	USBハブ	USB規格 Rev.2.0準拠 セルフパワー Upストリーム1ポート、Downストリーム2ポート
適合規格・規制	JESRA X-0093(管理グレード2)、 ANSI/AAMI E560601-1(2005)+A1(2012)、 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1(2014)、 CE(EN60601-1、EN60601-1-2) FCC Part15 subpart B Class B、ICES-003-B、 VCCI-B適合、RCM、J-Moss、RoHS	
物理的仕様	外形寸法 (スタンドを含む)	ランドスケープ使用時: 560.2mm×496.8/531.3mm×220.0mm(W×H×D)
	質量	約11.1kg
	スタンド	チルト、スイーベル機能付き
	本体取り付け部	VESA準拠(取り付けピッチ:100×100mm)
セキュリティ機構	盗難防止セキュリティスロット付き(本体部)	
付属品	電源コード、DVIケーブル、DisplayPortケーブル、 VGAケーブル、USBケーブル、3P-2P変換アダプタ、 保証書付き取扱説明書	

寸法図 (単位: mm)

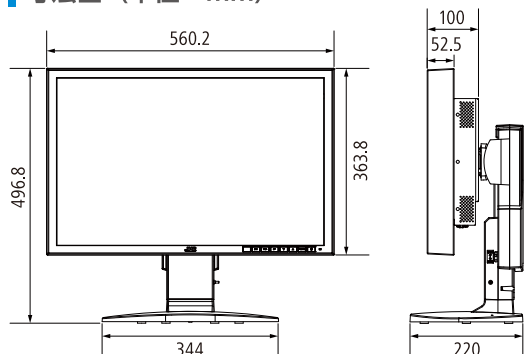

※本カタログ製品は医療機器ではありません。

●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。 ●画面はハメコミ合成です。

安全点検
の
お願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ヘルスケア事業部 営業部

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare_sys/

TEL 045-450-1890

ヘルスケア事業部 営業部(大阪)

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 TEL 06-6442-3171

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ