

JVC

フルHD27型カラー液晶モニター

CL-E270

CL-E270WA0JA



内視鏡・手術画像を高精細に表示する
フルHD対応フラットデザイン27型ワイドモニター



CL-E270

内視鏡・手術画像を見やすく表示

高画質IPS方式液晶パネルを採用し、視野角による輝度と色味の変化が少ない内視鏡・手術画像を表示します。

複数の画像の同時表示が可能なPinP・PbyP機能

2つの入力信号に対して、メイン画像上に小画像を表示するPinP機能、2画像を並べて表示するPbyP機能を搭載。異なる2つの画像を同時に表示します。



PinP機能



PbyP機能

清潔で安全なフラットデザイン

モニター画面と操作パネル面をフラット化し、防水対応(モニター前面:IP45)にすることで簡単に画面の清掃が行えます。また、ガラス部分はアルコール(消毒用エタノール)での清拭が可能です。モニター画面には強化ガラスを採用し、不意な衝撃・キズ・汚れから大切なモニターを守ります。



操作しやすい静電タッチボタンを採用


シンプルで分かりやすい静電タッチボタンでモニターを簡単に操作できます。静電タッチボタンはモニター面より少し奥側に配置することで意図しない誤操作を防ぎます。



※ DVI-D 入力時

複数のインターフェースを搭載

デジタルの入力インターフェース(DVI-D×2、3G-SDI×1)と出力インターフェース(DVI-D×1、3G-SDI×1)を搭載し、同じ画像を複数台のモニターで表示できます。

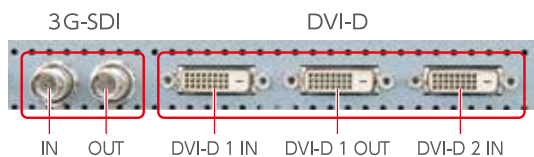

ACアダプタ不要な電源内蔵タイプ


モニター本体に電源が内蔵されているためすっきりとした配線が可能。

仕様

モデル名	CL-E270
型名	CL-E270WA0JA
サイズ	27型
方式	IPS方式 カラー
表示画面サイズ	水平597.8mm×垂直336.3mm
画素ピッチ	水平0.311mm×垂直0.311mm
最大輝度	300cd/m ² (typ.)
コントラスト比	1000:1(typ.)
視野角	上下178°/左右178°
解像度	1920×1080(フルHD)
表示性能	表示色 8bit:1677万色
入力信号	デジタル:DVI-D×2、3G-SDI×1
出力信号	デジタル:DVI-D、3G-SDI
プラグアンドプレイ	DDC2B対応(DVI-D)
制御信号他	RS-232C(D-sub9pin)、USB(Type-B)
入力電源	AC100~240V・50/60Hz
消費電力	最大時:40W(typ.) パワーマネジメント機能動作時:6.0W以下
キャリブレーション	輝度、ガンマ、色度の調整 ※オプションのキャリブレーションキットが必要
その他	PinP(ピクチャーインピクチャー)機能、 PbyP(ピクチャーバイピクチャー)機能
適用規格・規制	ANSI/AAMI ES60601-1(2005)+A1(2012)、 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1(2014)、 CE(EN60601-1、EN60601-1-2)、FCC Part15 subpart B Class B、 ICES-003-B、VCCI-B適合、J-Moss、RoHS
外形寸法	幅632.8mm×高さ393.8mm×奥行63mm
質量	約7.6kg
本体取り付け部	VESA準拠(取り付けピッチ:100×100mm)
付属品	電源コード、DVIケーブル、VESAマウント取付用ネジ(×4)、 保証書付取扱説明書
保証期間	3年間

入力	主な対応信号
3G-SDI	720p/24、25、30、50、60 1080i/50、60、1080p/24、25、30、50、60、1080p/24、25、30
DVI-D	VGA、SVGA、SXGA、フルHD、UXGA、WUXGA

寸法図(単位:mm)

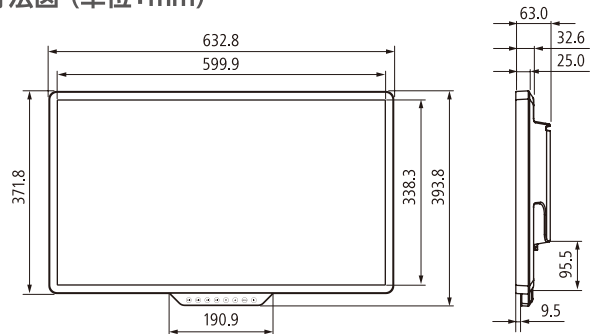

オプション

キャリブレーションキット CAL-016

キャリブレーションキット「CAL-016」を使用することで、任意の輝度・ガンマ・色温度の正確なキャリブレーションが行えます。



※本カタログ製品は医療機器ではありません。

●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。 ●画面はハメコミ合成です。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	→ コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ヘルスケア事業部 営業部

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare_sys/

TEL 045-450-1890

ヘルスケア事業部 営業部(大阪)

〒553-0002 大阪市福島区鶴洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 TEL 06-6442-3171

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ